



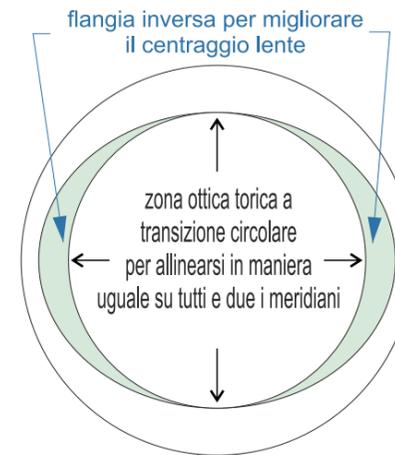

# 45 giorni PERSONAL

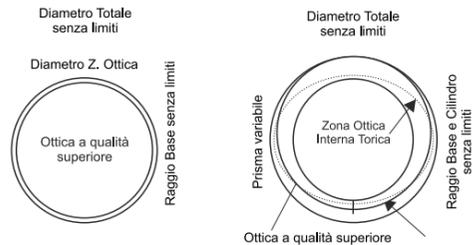

torica morbida

Lente a contatto morbida al 56% di idratazione SFERICA e TORICA.  
La lente a contatto «PERSONAL» è una lente completamente personalizzata alla morfologia del portatore. Si personalizza la curvatura e il diametro e si valuta nel caso di microcornee o macrocornee anche la profondità sagittale. La geometria a disimpegno asferico esalta l'applicazione personalizzata.  
La lente «PERSONAL» non ha limiti di costruzione ed è confezionata in flaconcino di vetro in box da due lenti.

<b>GAMMA PRODOTTO SFERICA</b> <b>Raggio Base:</b> da 6.00 a 10.20 di 0.05 mm <b>Diametro:</b> da 10.50 a 18.50 di 0.10 mm <b>Potere:</b> da +45.00 a -45.00 di 0.25D	<b>GAMMA PRODOTTO TORICA</b> <b>Raggio Base:</b> da 6.00 a 10.20 di 0.05 mm <b>Diametro:</b> da 10.50 a 18.50 di 0.10 mm <b>Potere:</b> da +45.00 a -45.00 di 0.25D <b>Cilindro:</b> fino a -15.00 di 0.25D <b>Asse:</b> tutti di 1 grado	<b>GAMMA PRODOTTO PROGRESSIVA</b> <b>Raggio Base:</b> da 6.00 a 10.20 di 0.05 mm <b>Diametro:</b> da 10.50 a 18.50 di 0.10 mm <b>Potere:</b> da +45.00 a -45.00 di 0.25D <b>Addizione:</b> fino +3.50D
---	--	--



trimestrale

- Il centraggio della lente a contatto morbida torica non è più un problema

**PRODUZIONE:** Lente a contatto prodotta per tornitura ad alta qualità ottica con superfici altamente rifinite. La qualità ottica di questa lente non è paragonabile con nessuna lente di pari posizionamento. Altissima ripetibilità

**MATERIALE:** Queste lenti sono prodotte in materiale PolyHema 56% ricco di additivi umettanti e stabilizzanti per ottenere un'alta bagnabilità e comfort e una superiore ritenzione idrica per mantenere le lenti in piena idratazione per tutta la durata di porto. 56% di acqua, DK (@ -3.00D) 26

**CONFEZIONE** da 2 lenti in flaconcino con possibilità di personalizzazione. Ogni lente ha una durata consigliata di 45 giorni e la confezione ha un ricambio trimestrale.

**VALUTAZIONI APPLICATIVE:** come si può immaginare di applicare una lente standard su questi due classici esempi di 'K' (meridiano più piatto) uguale? (fig.01)

Facendo le dovute considerazioni dobbiamo cercare il miglior allineamento possibile valutando la profondità sagittale di ogni cornea. In questo modo possiamo personalizzare l'applicazione al meglio per una contattologia moderna e professionale fidelizzando il portatore.

# STABILA



- Lente a contatto morbida torica al 69% in materiale SILICONE HYDROGEL per la correzione degli ASTIGMATISMI.
- La lente a contatto «STABILA» è una lente a contatto MORBIDA TORICA a stabilizzazione PRISMO / DINAMICA con zona ottica torica interna a transizione circolare e flangia INVERSA per la perfetta stabilizzazione in asse della lente.

- Questa lente utilizza l'INVERSIONE della flangia per AUTOCENTRARSI e sfrutta l'AMPIA superficie toroidale della sua zona ottica che rimane tale anche negli alti astigmatismi. I DIAMETRI della zona ottica nei DUE MERIDIANI risultano UGUALI e questo permette un perfetto allineamento con la cornea astigmatica.

- MATERIALE:** SILICONE HYDROGEL, Lucifilcon A, al 69% di acqua ad alto bilanciamento idrico e stabile e resistente ai depositi. Non ionico DK 60

- RICAMBIO:** Trimestrale

- CONFEZIONE:** 1 lente in fiala

- PARAMETRI DI APPLICAZIONE**  
**Scelta Raggio Base:** come una comune lente a ricambio trimestrale:

- Raggio Base = Meridiano più piatto +0.60 per un diametro 13.50
- Raggio Base = Meridiano più piatto +0.70 per un diametro 14.00
- Raggio Base = Meridiano più piatto +0.80 per un diametro 14.50

- APPLICAZIONE:** Movimento ideale 1 mm.

- GAMMA PRODOTTO**  
**Raggio Base:** da 7.00 a 9.80 di 0.10 mm  
**Diametro:** da 12.00 a 16.00 di 0.10 mm  
**Sfero:** da +30.00 a -30.00D di 0.25D  
**Cilindro:** fino a -12.00 di 0.25D  
**Assi:** tutti di 1°  
**Spessore:** 0.10 @ -3.00

## CALCOLO PARAMETRI DELLALENTE A CONTATTO MORBIDA SECONDO IL METODO DELLA PROFONDITA' SAGITALE


### CALCOLO RAGGIO BASE E DIAMETRO

**RAGGIO BASE:** rilevare il meridiano corneale più piatto 'K' e il diametro visibile dell'iride e incrociarlo nella tabella sottostante.

**IL DIAMETRO TOTALE:** è sempre 2 mm più grande del diametro visibile dell'iride



'K' 7.80 con diametro corneale 12.40 mm  
Raggio Base 8.35, Diametro 14.40 mm

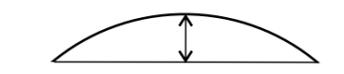


'K' 7.80 con diametro corneale 11.00 mm  
Raggio Base 9.40, Diametro 13.00 mm

K	DIAMETRO VISIBILE DELL'IRIDE mm																	
	10,00	10,20	10,40	10,60	10,80	11,00	11,20	11,40	11,60	11,80	12,00	12,20	12,40	12,60	12,80	13,00	13,20	13,40
6,50	8,85	8,70	8,55	8,40	8,25	8,10	7,95	7,80	7,65	7,50	7,35	7,20	7,05	6,90	6,75	6,60	6,45	6,30
6,55	8,90	8,75	8,60	8,45	8,30	8,15	8,00	7,85	7,70	7,55	7,40	7,25	7,10	6,95	6,80	6,65	6,50	6,35
6,60	8,95	8,80	8,65	8,50	8,35	8,20	8,05	7,90	7,75	7,60	7,45	7,30	7,15	7,00	6,85	6,70	6,55	6,40
6,65	9,00	8,85	8,70	8,55	8,40	8,25	8,10	7,95	7,80	7,65	7,50	7,35	7,20	7,05	6,90	6,75	6,60	6,45
6,70	9,05	8,90	8,75	8,60	8,45	8,30	8,15	8,00	7,85	7,70	7,55	7,40	7,25	7,10	6,95	6,80	6,65	6,50
6,75	9,10	8,95	8,80	8,65	8,50	8,35	8,20	8,05	7,90	7,75	7,60	7,45	7,30	7,15	7,00	6,85	6,70	6,55
6,80	9,15	9,00	8,85	8,70	8,55	8,40	8,25	8,10	7,95	7,80	7,65	7,50	7,35	7,20	7,05	6,90	6,75	6,60
6,85	9,20	9,05	8,90	8,75	8,60	8,45	8,30	8,15	8,00	7,85	7,70	7,55	7,40	7,25	7,10	6,95	6,80	6,65
6,90	9,25	9,10	8,95	8,80	8,65	8,50	8,35	8,20	8,05	7,90	7,75	7,60	7,45	7,30	7,15	7,00	6,85	6,70
6,95	9,30	9,15	9,00	8,85	8,70	8,55	8,40	8,25	8,10	7,95	7,80	7,65	7,50	7,35	7,20	7,05	6,90	6,75
7,00	9,35	9,20	9,05	8,90	8,75	8,60	8,45	8,30	8,15	8,00	7,85	7,70	7,55	7,40	7,25	7,10	6,95	6,80
7,05	9,40	9,25	9,10	8,95	8,80	8,65	8,50	8,35	8,20	8,05	7,90	7,75	7,60	7,45	7,30	7,15	7,00	6,85
7,10	9,45	9,30	9,15	9,00	8,85	8,70	8,55	8,40	8,25	8,10	7,95	7,80	7,65	7,50	7,35	7,20	7,05	6,90
7,15	9,50	9,35	9,20	9,05	8,90	8,75	8,60	8,45	8,30	8,15	8,00	7,85	7,70	7,55	7,40	7,25	7,10	6,95
7,20	9,55	9,40	9,25	9,10	8,95	8,80	8,65	8,50	8,35	8,20	8,05	7,90	7,75	7,60	7,45	7,30	7,15	7,00
7,25	9,60	9,45	9,30	9,15	9,00	8,85	8,70	8,55	8,40	8,25	8,10	7,95	7,80	7,65	7,50	7,35	7,20	7,05
7,30	9,65	9,50	9,35	9,20	9,05	8,90	8,75	8,60	8,45	8,30	8,15	8,00	7,85	7,70	7,55	7,40	7,25	7,10
7,35	9,70	9,55	9,40	9,25	9,10	8,95	8,80	8,65	8,50	8,35	8,20	8,05	7,90	7,75	7,60	7,45	7,30	7,15
7,40	9,75	9,60	9,45	9,30	9,15	9,00	8,85	8,70	8,55	8,40	8,25	8,10	7,95	7,80	7,65	7,50	7,35	7,20
7,45	9,80	9,65	9,50	9,35	9,20	9,05	8,90	8,75	8,60	8,45	8,30	8,15	8,00	7,85	7,70	7,55	7,40	7,25
7,50	9,85	9,70	9,55	9,40	9,25	9,10	8,95	8,80	8,65	8,50	8,35	8,20	8,05	7,90	7,75	7,60	7,45	7,30
7,55	9,90	9,75	9,60	9,45	9,30	9,15	9,00	8,85	8,70	8,55	8,40	8,25	8,10	7,95	7,80	7,65	7,50	7,35
7,60	9,95	9,80	9,65	9,50	9,35	9,20	9,05	8,90	8,75	8,60	8,45	8,30	8,15	8,00	7,85	7,70	7,55	7,40
7,65	10,00	9,85	9,70	9,55	9,40	9,25	9,10	8,95	8,80	8,65	8,50	8,35	8,20	8,05	7,90	7,75	7,60	7,45
7,70	10,05	9,90	9,75	9,60	9,45	9,30	9,15	9,00	8,85	8,70	8,55	8,40	8,25	8,10	7,95	7,80	7,65	7,50
7,75	10,10	9,95	9,80	9,65	9,50	9,35	9,20	9,05	8,90	8,75	8,60	8,45	8,30	8,15	8,00	7,85	7,70	7,55
7,80	10,15	10,00	9,85	9,70	9,55	9,40	9,25	9,10	8,95	8,80	8,65	8,50	8,35	8,20	8,05	7,90	7,75	7,60
7,85	10,20	10,05	9,90	9,75	9,60	9,45	9,30	9,15	9,00	8,85	8,70	8,55	8,40	8,25	8,10	7,95	7,80	7,65
7,90	10,25	10,10	9,95	9,80	9,65	9,50	9,35	9,20	9,05	8,90	8,75	8,60	8,45	8,30	8,15	8,00	7,85	7,70
7,95	10,30	10,15	10,00	9,85	9,70	9,55	9,40	9,25	9,10	8,95	8,80	8,65	8,50	8,35	8,20	8,05	7,90	7,75
8,00	10,35	10,20	10,05	9,90	9,75	9,60	9,45	9,30	9,15	9,00	8,85	8,70	8,55	8,40	8,25	8,10	7,95	7,80
8,05	10,30	10,15	10,00	9,85	9,70	9,55	9,40	9,25	9,10	8,95	8,80	8,65	8,50	8,35	8,20	8,05	7,90	7,75
8,10	10,35	10,20	10,05	9,90	9,75	9,60	9,45	9,30	9,15	9,00	8,85	8,70	8,55	8,40	8,25	8,10	7,95	7,80
8,15	10,40	10,25	10,10	9,95	9,80	9,65	9,50	9,35	9,20	9,05	8,90	8,75	8,60	8,45	8,30	8,15	8,00	7,85
8,20	10,35	10,20	10,05	9,90	9,75	9,60	9,45	9,30	9,15	9,00	8,85	8,70	8,55	8,40	8,25	8,10	7,95	7,80
8,25	10,40	10,25	10,10	9,95	9,80	9,65	9,50	9,35	9,20	9,05	8,90	8,75	8,60	8,45	8,30	8,15	8,00	7,85
8,30	10,45	10,30	10,15	10,00	9,85	9,70	9,55	9,40	9,25	9,10	8,95	8,80	8,65	8,50	8,35	8,20	8,05	7,90
8,35	10,50	10,35	10,20	10,05	9,90	9,75	9,60	9,45	9,30	9,15	9,00	8,85	8,70	8,55	8,40	8,25	8,10	7,95
8,40	10,45	10,30	10,15	10,00	9,85	9,70	9,55	9,40	9,25	9,10	8,95	8,80	8,65	8,50	8,35	8,20	8,05	7,90
8,45	10,50	10,35	10,20	10,05	9,90	9,75	9,60	9,45	9,30	9,15	9,00	8,85	8,70	8,55	8,40	8,25	8,10	7,95
8,50	10,55	10,40	10,25	10,10	9,95	9,80	9,65	9,50	9,35	9,20	9,05	8,90	8,75	8,60	8,45	8,30	8,15	8,00
8,55	10,60	10,45	10,30	10,15	10,00	9,85	9,70	9,55	9,40	9,25	9,10	8,95	8,80	8,65	8,50	8,35	8,20	8,05
8,60	10,55	10,40	10,25	10,10	9,95	9,80	9,65	9,50	9,35	9,20	9,05	8,90	8,75	8,60	8,45	8,30	8,15	8,00
8,65	10,60	10,45	10,30	10,15	10,00	9,85	9,70	9,55	9,40	9,25	9,10	8,95	8,80	8,65	8,50	8,35	8,20	8,05
8,70	10,65	10,50	10,35	10,20	10,05	9,90	9,75	9,60	9,45	9,30	9,15	9,00	8,85	8,70	8,55	8,40	8,25	8,10


materiale ad esclusivo uso professionale



Mai più i fastidi di una lente astigmatica, niente prismi e spessori maggiorati.  
Per correzioni fino a 1.50D di astigmatismo.

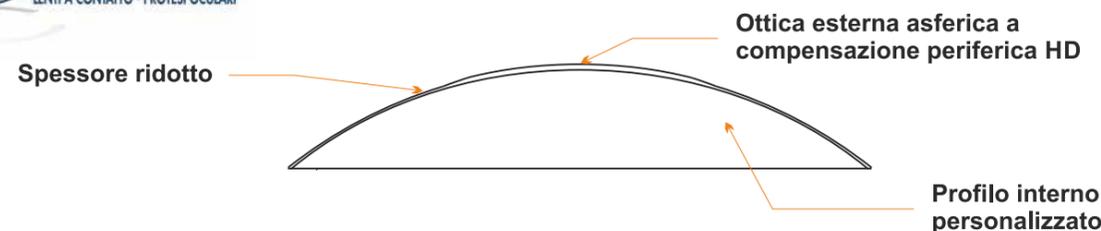

BI-PROGRESSIVA

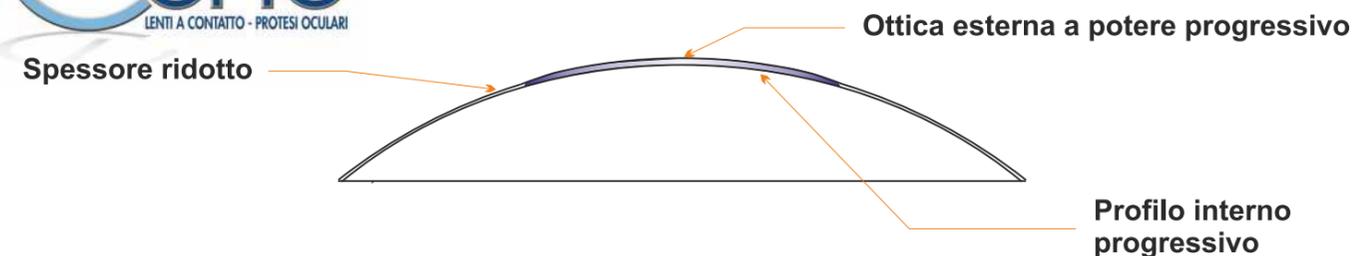

# OK<sup>plus(+)</sup>HD



Mai più i fastidi di una lente astigmatica, niente prismi e spessori maggiorati per correzioni fino a 1.50D di astigmatismo.

- Lente a contatto morbida a compensazione periferica HD che permette anche la correzione degli astigmatismi fino a 1.50D oltre alla migliore definizione delle immagini. Prodotta in materiale SILICONE HYDROGEL al 69% di acqua.
- La lente a contatto **OK<sup>plus(+)</sup>HD** è una lente a contatto MORBIDA a spessore ridotto, distribuito e concentrica con zona ottica esterna a porzione periferica HD, interno sferica a totale personalizzazione di raggio base e diametro.
- Questa lente sfrutta la zona HD per eliminare le aberrazione sferiche e per compensare, dove fosse necessario, gli astigmatismi fino a 1.50D con **OK<sup>plus(+)</sup>HD**

### PERCHE' SCEGLIERE «OK<sup>plus(+)</sup>HD»

- Massima PERSONALIZZAZIONE di RAGGIO BASE, DIAMETRO e POTERE in particolare se la applichi secondo la PROFONDITA' SAGITALE
  - Facile da APPLICARE e CONTROLLARE come una normale disponibile
    - Ricambio frequente TRIMESTRALE
  - FIDELIZZAZIONE del PORTATORE con personalizzazione del prodotto
    - VENDITA propria PROFESSIONALITA' e non il marchio lenti
- PERSONALIZZAZIONE CONFEZIONAMENTO con ETICHETTA con PROPRIO LOGO
  - MAGGIORE PROFITTO

#### MATERIALE:

- **SILICONE HYDROGEL**, Lucifilcon A, al 69% di acqua ad alto bilanciamento idrico e stabile e resistente ai depositi.
- Non ionico
- DK 60

#### RICAMBIO:

- Trimestrale

CONFEZIONE: 1 lente in fiala

#### PARAMETRI DI APPLICAZIONE

- **Scelta Raggio Base:** come una comune lente a ricambio frequesnte:
  - Raggio Base = Meridiano più piatto +0.60 per un diametro 13.50
  - Raggio Base = Meridiano più piatto +0.70 per un diametro 14.00
  - Raggio Base = Meridiano più piatto +0.80 per un diametro 14.50

#### SCELTA DEL POTERE

- Nel caso di foro pupillare ampio (maggiore di 4,00 mm) :Addizionare 1/3 dell'astigmatismo in positivo al potere sferico su lente a contatto

- **APPLICAZIONE:** Movimento ideale 1 mm.

#### GAMMA PRODOTTO

- **Raggio Base:** da 7.00 a 9.80 di 0.10 mm
- **Diametro:** da 12.00 a 16.00 di 0.10 mm
- **Sfero:** da +30.00 a -30.00D di 0.25D
- **Cilindro:** fino a -1.50D
- **Spessore:** 0.11 @-3.00D

# OK<sup>plus(+)</sup>PRO



Una lente a contatto BI-PROGRESSIVA con il profilo progressivo concentrico sia nella superficie interna che esterna.

- Lente a contatto morbida progressiva che permette anche la compensazione astigmatica fino a 1.50D.
- Prodotta in materiale SILICONE HYDROGEL al 69% di acqua.
- La lente a contatto **OK<sup>plus(+)</sup>PRO** è una lente a contatto MORBIDA a spessore ridotto, distribuito e concentrica con zona ottica esterna progressiva, interno progressivo a totale personalizzazione di raggio base e diametro.
- Questa lente sfrutta la zone periferiche per compensare anche gli astigmatismi fino a 1.50D.

### PERCHE' SCEGLIERE «OK<sup>plus(+)</sup>PRO»

- Massima PERSONALIZZAZIONE di RAGGIO BASE, DIAMETRO e POTERE in particolare se la applichi secondo la PROFONDITA' SAGITALE
  - Facile da APPLICARE e CONTROLLARE come una normale disponibile
    - Ricambio frequente TRIMESTRALE
  - FIDELIZZAZIONE del PORTATORE con personalizzazione del prodotto
    - VENDITA propria PROFESSIONALITA' e non il marchio lenti
- PERSONALIZZAZIONE CONFEZIONAMENTO con ETICHETTA con PROPRIO LOGO
  - MAGGIORE PROFITTO

#### MATERIALE:

- **SILICONE HYDROGEL**, Lucifilcon A, al 69% di acqua ad alto bilanciamento idrico e stabile e resistente ai depositi.
- Non ionico DK 60

#### RICAMBIO:

- Trimestrale

CONFEZIONE: 1 lente in fiala

#### PARAMETRI DI APPLICAZIONE

- **Scelta Raggio Base:** come una comune lente a ricambio frequesnte:
  - Raggio Base = Meridiano più piatto +0.60 per un diametro 13.50
  - Raggio Base = Meridiano più piatto +0.70 per un diametro 14.00
  - Raggio Base = Meridiano più piatto +0.80 per un diametro 14.50

#### SCELTA DEI POTERI (lontano e vicino)

- Come da prescrizione occhiale (portando il potere all'apice)
- Nel caso di foro pupillare ampio (maggiore di 4,00 mm) :Addizionare -0.50 al potere da lontano.

- **APPLICAZIONE:** Movimento ideale 1 mm.

#### GAMMA PRODOTTO

- **Raggio Base:** da 7.00 a 9.80 di 0.10 mm
- **Diametro:** da 12.00 a 16.00 di 0.10 mm
- **Sfero:** da +30.00 a -30.00D di 0.25D
- **Cilindro:** fino a -1.50D
- **Spessore:** 0.11 @-3.00D
- **Addizione:** bassa (fino a +1.25D)  
media (fino a +2.50D)  
alta (fino +3.50D)